

bionice

EXCLUSIVE COSMETIC ICE



Instructions for use

Gebrauchsanleitung

Инструкция по
применению прибора

GEBRAUCHSANLEITUNG

Bestandteile:

Halter für die Silikonform



Foto 1

Silikonform im Halter



Foto 2

Optisches Verbindungselement,
das gefroren wird



Foto 3

Halter für das optische
Verbindungselement



Foto 4

Rote und blaue Lichtquelle



Foto 5

Plattform zum Aufbewahren und Lagern
in den Gefrierschrank



Foto 6

Vorbereitung des Gerätes

Achtung: zur Vorbereitung von BIO N'ICE kosmetischem Eis gebrauchen Sie bitte nur thermisches, destilliertes oder abgekochtes Wasser.

Das Bio N'ice Set beinhaltet 2 LED Lichtquellen (1x rot und 1x blau).

Die Lichtquelle für das rote Spektrum ist zum morgendlichen Gebrauch gedacht. Es aktiviert zelluläre Prozesse im Hautgewebe.

Das blaue Licht eignet sich zum abendlichen Gebrauch. Es hat beruhigende und antiseptische Eigenschaften.

Einige einfache Schritte zur Vorbereitung des Bio N'ice Gerätes

Zuerst schieben Sie die elastische Silikonform in den Halter.

Fügen Sie 1-2 Tropfen (z.B. grünen Tee Extrakt) in die Silikonform hinzu.

Dann füllen Sie die Silikonform mit Wasser (bis etwa 5 mm unter den oberen Rand der Form) Foto 7.

Als Nächstes präparieren Sie die optische Adapterklemme, indem Sie sie in den Einschub für den Adapter einschieben. Pressen Sie sie ganz hinein und dann bewegen Sie sie zur Seite (Foto 4).

Platzieren Sie die Verbindungselement den Silikonformhalter, der mit Wasser und der aktiven Substanz gefüllt ist (Foto 8).

Platzieren Sie die ordentlich zusammengebaute Eisform auf die Plattform (Foto 6) und lagern Sie es im Gefrierfach nicht weniger als 5 Stunden.



Foto 7



Foto 8

Nach Beendigung des Gefriervorgangs nehmen Sie den Kristallisator aus dem Gefrierfach und lassen Sie ihn etwa 1-2 Minuten bei Raumtemperatur liegen, so dass die Eiskristalle leicht von der Silikonform gelöst werden können. Wenn er nicht sofort gebraucht wird, kann der montierte Kristallisator im Gefrierfach aufbewahrt werden, bis er gebraucht wird (Foto 9 - 10).



Foto 9



Foto 10

Dann schieben Sie die ausgewählte Lichtquelle in die Tube für den Adapter, der sich oberhalb der Silikonform befindet.

Das montierte Gerät ist gebrauchsfertig wenn der Endschalter des Gerätes betriebsbereit ist (Foto 11).

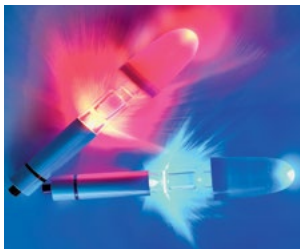


Foto 11


Gebrauchsanweisung

Vor der Behandlung muss die Haut gesäubert werden und ohne Make-up sein.

So soll das Gerät benutzt werden:

Nehmen Sie das Gerät in die Hand und drücken Sie den Knopf, der das Lichtelement aktiviert. Das Kristall wird anfangen, Licht auszustrahlen. Bewegen Sie das Eiskristall sanft über die Haut, wie im Bild (Schema 1) gezeigt. Auf diese Weise wird sowohl das Gesicht als auch die Halspartie behandelt. Die Geschwindigkeit sollte etwa 5 cm pro Sekunde betragen, damit Sie Ihre Gesichtshaut nicht unterkühlen. Dieses Vorgehen dauert etwa 2 Minuten. Ein Eiskristall kann für bis zu 2 Anwendungen benutzt werden.

Nach dem Gebrauch nehmen Sie das Eiskristall aus der Lichtquelle, reinigen Sie den Adapter unter fließendem Wasser und wiederholen Sie die Vorbereitung eines neuen Eiskristalles wie in der Anleitung oben beschrieben.

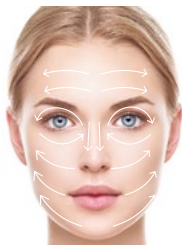

Schema 1

Nach der Behandlung kann die Haut mit einem sauberen (Kosmetik) Tuch durch sanftes Tupfen getrocknet werden.

Es wird jedoch empfohlen, die Haut im Gesicht und am Hals natürlich trocknen zu lassen.

Verbrauchte Knopfzellen LR 41 durch neue ersetzen

Jede Lichtquelle verwendet drei Knopfzellen LR 41.

Um verbrauchte Knopfzellen LR 41 durch neue zu ersetzen:

1. schrauben Sie bitte den Deckel des Gerätes auf
2. ziehen Sie das Kunststofffach mit den verbrauchten Batterien (Knopfzellen) aus dem Gehäuse heraus.
3. legen Sie neue Knopfzellen in das Bat-

teriefach ein.

4. legen Sie das Batteriefach in das Gerät zurück, wobei sich der Pluspol oben befinden sollte.
5. schrauben Sie den Deckel wieder zu

